

A KÚPANIE KONEČNE
BEZ PREKÁŽOK

**S VODOODOLNÝMI
OCHRANNÝMI NÁVLEKMI**

Limbo[®]
Waterproof protectors



Limbo

Vodoodolné ochranné návleky

Návleky Limbo sú určené na ochranu sadrových a iných obväzov, katétrov pri kúpeli alebo sprchovaní. Teraz už nemusíte robiť kompromisy pri bežnej hygiene!

Patentovaný dizajn a použitie najkvalitnejších materiálov garantujú správnu funkciu návleku niekoľko týždňov a sú tak vhodné pre pacientov s dlhším časom liečenia.

Tesniacu manžetu tvorí neoprén s krycou spevňujúcou nylónovou vrstvou.

Hlavná časť návleku je vyrobená zo špeciálnej trojvrstvovej kalandrovanej tkaniny s PVC fóliami a spevňujúcim jadrom z nylónových vlákien.

Švy a spoje sú zvarené pre maximálnu vodotesnosť.

Neoprénové manžety prilnú vďaka treniu, nezvierajú pokožku a sú tak vhodné aj pre ľudí s poruchami prerivenia.

Návleky Limbo neobsahujú latex a sú nesterilné.

-
- **Ľahké navliekanie a vyzliekanie:**
klíže cez sadrový alebo iný obväz
 - **Úplne ponorné:** okrem modelov na chodidlo
 - **Jemná neoprénová manžeta**
 - **Spevnený PVC rukáv:** zvarené švy
 - **Na opakované používanie**
-



DO POLOVICE NOHY

sú určené na ochranu obväzov v časti nohy pod kolenom. Tesniaca manžeta obopína nohu tesne nad kolenom. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.



Pre DOSPELÝCH

Model/ číslo	obvod nohy	výška celkom
M80	39 – 54 cm	165 cm – 183 cm
M80S	39 – 54 cm	pod 165 cm
M80L	39 – 54 cm	nad 183 cm
M76	35 – 39 cm	165 – 183 cm
M76S	35 – 39 cm	pod 165 cm
M76L	35 – 39 cm	nad 183 cm
M180	52 – 59 cm	165 – 183 cm
M180S	52 – 59 cm	pod 165 cm
M180L	52 – 59 cm	nad 183 cm
M200HL	65 – 90 cm	165 – 183 cm

Pre DETI

Model/ číslo	vek	obvod nohy
BK1113	11 – 13 rokov	35 – 39 cm

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

NA CELÚ NOHU


určené na ochranu obväzov na celej nohe. Tesniaca manžeta obopína nohu vo vyššej časti stehna. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH

Model/číslo	obvod nohy	výška celkom
M100	52 – 65 cm	165 – 183 cm
M100S	52 – 65 cm	pod 165 cm
M100L	52 – 65 cm	nad 183 cm
M80LL	39 – 54 cm	165 – 183 cm
M200FL	65 – 90 cm	165 – 183 cm

Pre DETI

Model/číslo	vek	obvod nohy
FL3	3 roky	25 – 34 cm
FL45	4 – 5 rokov	25 – 34 cm
FL67	6 – 7 rokov	35 – 39 cm
FL810	8 – 10 rokov	39 – 54 cm
FL1113	11 – 13 rokov	39 – 54 cm

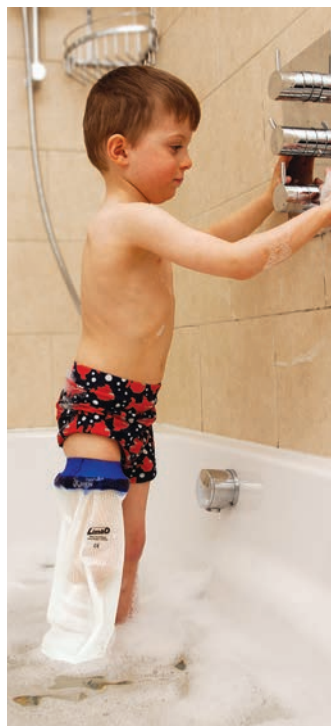

DO POLOVICE RUKY

sú určené na ochranu obväzov v časti ruky pod lakťom. Tesniaca manžeta obopína ruku tesne nad lakťom. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH

Model/číslo	obvod ruky
M60	25 – 29 cm
M67	30 – 39 cm
M50A	22 – 25 cm

Pre DETI

Model/číslo	vek	obvod ruky
BE1113	11 – 13 rokov	22 – 24 cm



OCHRANNÁ RUKAVICA



je určená na ochranu obväzov na dlani a prstoch.

Tesniaca manžeta obopína predlaktie tesne nad zápästím. Vhodná na použitie **v sprche alebo počas kúpeľa**.

Model: MITT

Univerzálna veľkosť pre dospelých.

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

NA CELÚ RUKU

je určený na ochranu obväzov na celej ruke. Tesniaca manžeta obopína rameno vo vyššej časti. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH

Model/číslo	obvod ruky
M70	30 – 39 cm
M87	39 – 54 cm
M60L	25 – 29 cm



Pre DETI

Model/číslo	vek	obvod ruky
FA23	2 – 3 roky	16 – 22 cm
FA45	4 – 5 rokov	16 – 22 cm
FA67	6 – 7 rokov	22 – 25 cm
FA810	8 – 10 rokov	22 – 25 cm
FA1113	11 – 13 rokov	25 – 34 cm

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

NA LAKEŤ, PICC ALEBO MIDLINE PERIFÉRNE KATÉTRE

sú určené na ochranu obväzov na lakti alebo periférnych katétrov zavedených v tomto mieste. Návlek má dve manžety, jedna obopína ruku nad lakťom a druhá pod lakťom. Vhodný na použitie v sprche alebo počas kúpeľa.

Pre DOSPELÝCH



Model/číslo	obvod ruky nad lakťom
M65	25 – 29 cm
M75	30 – 39 cm

NA CHODIDLO

sú určené na ochranu obväzov na chodidle. Manžeta obopína iba členok. Vhodný na použitie v sprche.

Pre DOSPELÝCH



Model/číslo	obvod členka
M20	20 – 25 cm
M25	23 – 34 cm

Uistite sa, že obvod končatiny ste merali na správnom mieste!
Sprievodcu meraním nájdete na strane 8.

VYBERTE SI SPRÁVNÚ VEĽKOSŤ VODOODOLNÝCH NÁVLEKOV LIMBO

Sprievodca meraním

NA CELÚ RUKU

Meriame obvod ramena v mieste zobrazenom červenou šípkou a dĺžku ruky z bodu A do bodu B.

V prípade sadrového obväzu celej ruky sa odporúča merať obvod v mieste lakťa, ak je táto časť ruky najširšia.

DO POLOVICE RUKY

Meriame obvod ramena nad lakťom v mieste zobrazenom červenou šípkou a dĺžku ruky z bodu C do bodu D.

NA CELÚ NOHU


Meriame obvod stehna v mieste označenom červenou šípkou a dĺžku nohy z bodu E do bodu F.

DO POLOVICE NOHY

Meriame obvod stehna nad kolenom označenom červenou šípkou a dĺžku nohy z bodu G do bodu H.

Ak je iná časť na nohe širšia ako je vyznačené na obrázku, odporúčame merať obvod nohy v najširšom mieste.

Navliekanie a vyzliekanie ochranných návlekov LIMBO si pozorne prečítajte v priloženom návode na použitie.

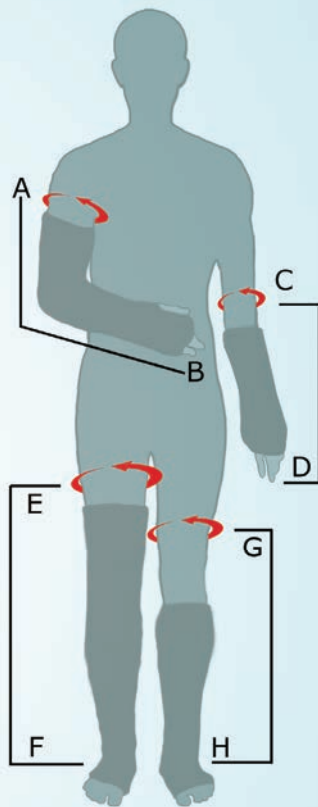

Pre viac informácií



V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!



Versium, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava

tel. číslo.: 02/50 100 993
e-mail: info@versium.sk
www.versium.sk